



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Equipos & Reactivos
Para el Laboratorio Veterinario

Soluciones tecnológicas
para el **cuidado animal**



Contenido

Nosotros	4
Línea Hematología	6
Línea Bioquímica	10
Línea de Gases y Electrolitos	15
Línea de Inmunofluorescencia	16
Línea de Pruebas Rápidas	18
Línea de Microscopios	20
Línea de Equipamiento	21

Destacamos como el principal proveedor a nivel nacional de equipos y reactivos para el laboratorio clínico veterinario que busca la combinación óptima entre **calidad y productividad**.

Sobre Nosotros

Como importadores y distribuidores de equipos y reactivos para laboratorios veterinarios, nuestra misión radica en priorizar la calidad en cada producto y proporcionar asesoría personalizada para adaptarnos a las necesidades de cada veterinaria. Nuestro compromiso con la excelencia se evidencia en la tecnología y el servicio post venta que ofrecemos, asegurando instrumentos y pruebas para diagnósticos precisos.

Buscamos potenciar la productividad en el sector diagnóstica, conscientes de su impacto en la salud animal. Nuestros productos contribuyen significativamente a mejorar la precisión diagnóstica, promoviendo el avance en la atención médica y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los animales.

Nuestras Certificaciones



Certificaciones Internacionales de Nuestros Proveedores



Contamos con importantes marcas del sector diagnóstica a nivel mundial


The logo for Kayto, featuring a stylized sun icon to the left of the word "Kayto" in a bold, sans-serif font.The logo for seamaty, with the word "seamaty" in a lowercase, italicized, sans-serif font.The logo for Horus Lab Equipments, with "Horus" in a bold, sans-serif font and "Lab Equipments" in a smaller font below it.The logo for VetFur Animal Care, with "VetFur" in a bold, sans-serif font and "ANIMAL CARE" in a smaller font below it, accompanied by a paw print icon.The logo for Haier, with the word "Haier" in a bold, sans-serif font.The logo for Nexcope Scientific research microscope, with "Nexcope" in a bold, sans-serif font and "Scientific research microscope" in a smaller font below it.The logo for ZENIHLAB, featuring the word "ZENIHLAB" in a bold, sans-serif font inside an oval shape with a registered trademark symbol.The logo for Gcell, with the word "Gcell" in a bold, sans-serif font and a stylized arrow pointing left below it.The logo for MKE Professional Centrifuge Manufacturer, with "MKE" in a bold, sans-serif font and "Professional Centrifuge Manufacturer" in a smaller font below it.

LÍNEA HEMATOLÓGICA

Analizador Hematológico de 3 Diferenciales

RT-7600 Vet

Robusto y preciso, el Rayto 7600 Vet es el analizador perfecto para las veterinarias por su precisión y obtención de resultados en tan solo 60 segundos donde ofrece un hemograma completo de 20 parámetros, 3 histogramas y alarmas patológicas para un diagnóstico seguro y confiable.

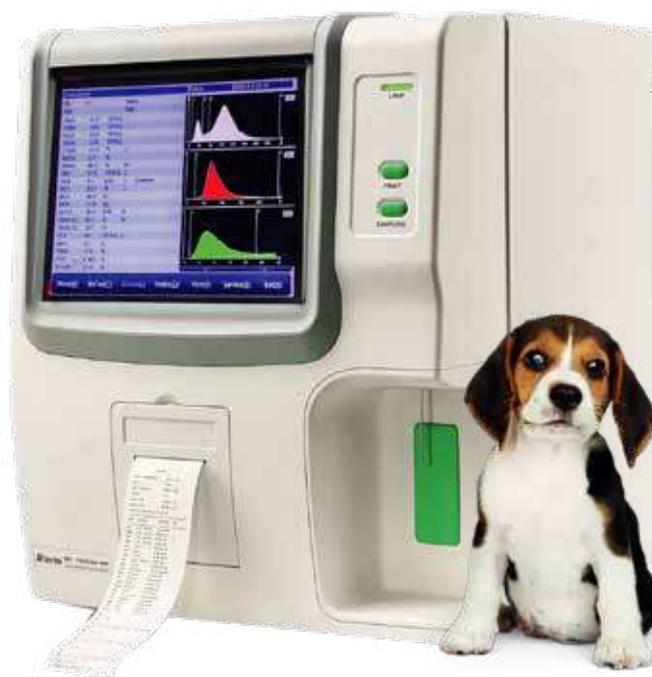

Fácil de usar

- ✓ Elige la **especie** de tu paciente, introduce sus **datos**, coloca la **muestra** y lee **resultados**.
- ✓ **Software amigable** y en idioma español, impresora incorporada.
- ✓ Lee muestras en modo **sangre completa** y pre diluida.

Completo

- ✓ **17 especies programables**, incluye perro, gato, mono, conejo, caballo, etc.
- ✓ **Hemograma completo** de 3 diferenciales con 20 parámetros.
- ✓ 3 histogramas de lectura: **leucocitos, eritrocitos y plaquetas**.

Preciso

- ✓ **Equipo robusto** de componentes internos de calidad.
- ✓ Programa de control de **calidad integrado**.
- ✓ Coeficiente de variación mínimo, **mejor precisión en las lecturas**.

Rapidez

- ✓ Resultado de hemograma completo en **solo 1 minuto**.
- ✓ Mantenimientos **automáticos y programables**.
- ✓ **Mayor fluidez en su atención médica**.

Rentabilidad

- ✓ Usa solo **3 reactivos**: diluyente, lisante y cleanser.
- ✓ **Mayor vida útil** del analizador por sus componentes de calidad.
- ✓ Menor costo del hemograma para **mayor rentabilidad**.

Hasta 17 especies calibradas



Hemograma en 1 minuto con alarmas patológicas



Especificaciones Técnicas RT-7600 Vet

Principio	Impedancia eléctrica para conteo de WBC, RBC y PLT. Colorimetría: HGB
Parámetros	WBC#, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR. Histogramas para WBC, RBC y PLT.
Desempeño	60 muestras por hora.
Tipo de muestra	Sangre total anticoagulada con EDTA-K2 o K3, sangre pre-diluida
Volumen de aspiración	Sangre completa 9.8 uL, sangre pre-diluida 20 uL
Monitor	Pantalla LCD a color.
Alarmas	Mensaje de error y mensajes por anomalías hematológicas.
Calibración	Automática y manual.
Software	En español y software de control de calidad integrado (L-J, QC-BQC, X-R OC)
Entrada y salida	RS-232, USB, LAN, teclado y mouse.
Dimensiones [L x W x H]	436 x 363 x 367 mm.
Impresión	Impresora térmica, papel de 55 mm de ancho, varios formatos de impresión, impresora externa opcional.

Analizador Hematológico de 5 Diferenciales

Hemaray 51 Vet

El analizador hematológico más avanzado y completo del mercado incorpora 3 tecnologías gold standard: citometría de flujo, impedancia eléctrica y colorimetría, proporcionando un hemograma completo de 29 parámetros y la fórmula leucocitaria en tan solo 1 minuto, convirtiéndolo en el equipo más ideal para la atención médica.



Fácil de usar

- ✓ Elige la **especie** de tu paciente, introduce sus **datos**, poner la **muestra** y leer **resultados**.
- ✓ Software amigable y en idioma español, **impresora incorporada**.
- ✓ Brinda alarmas ante alteraciones hematológicas.

Completo

- ✓ Hemograma completo de 5 diferenciales, 29 parámetros y fórmula leucocitaria.
- ✓ **22 especies programables**, incluye perro, gato, mono, conejo, caballo, etc.
- ✓ 3 histogramas de lectura: **leucocitos, eritrocitos y plaquetas**; y 2 dispersogramas.

Preciso

- ✓ **Equipo robusto** de componentes internos de calidad.
- ✓ Software de control de **calidad integrado**.
- ✓ Coeficiente de variación mínimo, **mejor precisión en las lecturas**.

Rapidez

- ✓ Resultado de hemograma completo en **tan solo 1 minuto**.
- ✓ **Mantenimientos automáticos y programables**.
- ✓ **Mayor fluidez** en su atención médica.

Rentabilidad

- ✓ Usa solo **3 reactivos**: diluyente y 2 lisantes.
- ✓ **Mayor vida útil** del analizador por sus **componentes de calidad**.
- ✓ Menor costo del hemograma para **mayor rentabilidad**.

Hasta 22 especies calibradas



Hemograma en 1 minuto con alarmas patológicas



Especificaciones Técnicas Hemaray 51 Vet

Principio	Citometría de flujo, impedancia eléctrica y colorimetría.
Parámetros reportables	WBC#, LYM#, BAS#, NEU#, EOS#, MON#, LYM%, BAS%, NEU%, EOS%, MON%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-SD, RDW-CV, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, ALY#, ALY%, LIC#, LIC% Histogramas para WBC, RBC, y PLT. 3 dispersogramas en 2D y 1 dispersograma en 3D.
Rendimiento	60 muestras por hora.
Modo	CBC; CBC + DIFF.
Volumen de aspiración	Sangre total: 15ul (CBC + DIFF / CBC) Sangre Pre-diluida: 20ul.
Almacenamiento de datos	100.000 resultados.
Alarmas	Mensaje de error y mensajes por anomalías hematológicas.
QC	Programa integrado de control de calidad con gráfica L-J, X-B, X-R, DS y CV%.
Reactivos	Diluyente RD-50, lisante RL-5D, lisante RL-50H y solución concentrada de limpieza.
Mantenimiento	Automantenimiento programado y con opciones para liberar coágulos, entre otros.
Impresión	Impresora interna y externa según configuración.
Tamaño	365mm x 470mm x 525mm; Peso: 31Kg.

LÍNEA BIOQUÍMICA

Analizador Bioquímico Semi Automatizado

RT 1904C Vet

El equipo ideal para procesar pruebas como glucosa, urea, creatinina, colesterol, bilirrubinas, entre otra gran variedad de pruebas bioquímicas para un diagnóstico y seguimiento clínico completo de tu paciente. Cuenta con un software veterinario para 12 especies de animales diferentes.



Características

- ✓ Fácil operación del sistema con mouse y pantalla LCD de 7" a color.
- ✓ Proporciona hasta **12 perfiles de animales**.
- ✓ Equipo de sistema abierto que puede usar **cualquier marca de reactivos**.
- ✓ Métodos de medición ideal para **todos los perfiles bioquímicos**.
- ✓ Monitoreo de curva de **reacción en tiempo real**.
- ✓ Memoria amplia, **hasta 200 protocolos de prueba**.
- ✓ **Control de calidad:** Gráficas de Levey Jennings, 2 controles por test.
- ✓ **Autodiagnóstico al encender** y función de protección de lámpara.
- ✓ Múltiples **informes de resultados**, incluido por paciente.
- ✓ **Fácil mantenimiento**, y acceso para el cambio de lámpara, tubos, etc.
- ✓ 7 logitudes de onda desde **340 mm a 670 mm, bicromático**.



Reactivos de Bioquímica GCELL

GCELL comprende la importancia de **obtener resultados precisos** y proporciona reactivos de la **más alta calidad** para garantizar resultados **confiables**. Nuestros reactivos, rigurosamente probados, tienen fuerte correlación con los métodos GOLD STANDARD y garantizan la uniformidad entre lotes para la **confianza total del laboratorio**.



CÓDIGO	REACTIVO	PRESENTACIÓN
EGGALB	Albumin Test reagent	6×50ml
EGGALT	ALT(GPT) Test reagent	R1:2×50mL R2:1×25ml
EGGAST	AST(GOT) Test reagent	R1:2×50mL R2:1×25ml
EGGALP	ALP Test reagent	R1:2×20mL R2:1×10ml
EGGCA	Calcium Test reagent	1×20 ml
EGGCHO	Cholesterol Test reagent	5×100ml
EGGTBDCA	Bilirubin Total Test reagent	R1:2×20mL R2:1×10ml
EGGDBDCA	Direct Bilirubin Test reagent	R1:2×20mL R2:1×10ml
EGGGGT	gamma-GT Test reagent	R1: 2×15 ml R2: 1×10 ml
EGGGLU	Glucose Test reagent	5×100ml
EGGLDH	LDH Test reagent	R1: 2×20 ml R2: 1×10 ml
EGGMG	Magnesium Test reagent	1×20 ml
EGGP	Inorganic phosphorus Test reagent	1×20 ml
EGGTP	Total Protein Test reagent	2×25ml
EGGTG	Triglycerides Test reagent	5×100ml
EGGUA	Uric Acid Test reagent	R1:3×20mL R2:1×15ml
EGGUREA	UREA Test reagent	R1:2×18mL R2:1×12ml
EGGUP	Proteina en orina/LCR Test reagent	1×20ml
EGC-UP	Proteina en orina/LCR Calibrator	1x1ml
EGQ-UP	Proteina en orina/LCR Control	2x1ml
EGGAMY	a-Amylase Test reagent	R1: 1×18 ml R2: 1×6 ml
EGGCRE	Creatinine Test reagent	R1:2×48mL R2:2×16ml
EGGFE	Iron Test reagent	R1:1×20mL R2:1×5ml
EGGHDL	HDL Test reagent	R1:3×60mL R2:1×60ml
EGC-HDL/LDL	HDL/LDL Calibrator	1×1ml
EGGK	Potassium Test reagent	R1: 1×18 ml R2: 1×6 ml
EGC-K	Potassium Calibrator	2x3ml
EGGNA	Sodium Test reagent	R1: 1×18 ml R2: 1×6 ml
EGC-NA	Sodium Calibrator	2x3ml
EGGLPS	Lipase Test reagent	R1: 1×18 ml R2: 1×6 ml
EGCLPS51	Lipase Calibrator	1×5 ml (Lyophilized)
EGQLPS	Lipase Control	2×1 ml (Lyophilized)
EGGmALB	Microalbumin Test reagent	R1: 1×18 ml R2: 1×6 ml
EGC-mALB	MALB Calibrator	6x2ml
EGQ-mALB	MALB Control	2×1ml
YGC-BM-Y/20	Multi Calibrator	20×3ml
YGQ-BM-Y-1/20	Multi Control Normal	20x5ml
YGQ-BM-Y-2/20	Multi Control Patológico	20x5ml

Analizador Bioquímico Automatizado de Microfluidos SMT-120VP

El analizador automático inteligente de bioquímica portátil tiene las ventajas de una alta automatización, un funcionamiento sencillo, un tamaño pequeño, un peso ligero, resultados precisos y no necesita mantenimiento.



seamaty



Paso 1

Agregar muestra



Paso 2

Panel de inserción



Paso 3

Leer resultado

Se requiere una pequeña muestra

Sólo 100ul de sangre entera, plasma o suero, más conveniente y seguro para animales pequeños y mascotas exóticas.

Fácil de usar

No es necesario centrifugar ni agregar diluyente, solo 3 sencillos pasos: agregar la muestra, insertar el disco y leer los informes.

Rápido y preciso

Lee los informes en 12 minutos, menos tiempo de espera para los pacientes. Sistema de control de calidad incorporado para garantizar la precisión.

Un solo equipo para todo

Cubre pruebas de bioquímica, coagulación, electrolitos e inflamación, generando mayores beneficios para usted con menores costos.

Pequeño y portátil

El analizador es pequeño y liviano, lo que ahorrará espacio en su laboratorio y permitirá realizar pruebas a los pacientes en el sitio.

Mantenimiento mínimo

No hay piezas de fácil desgaste y la bandeja de reactivo única se utiliza como un juego completo, que no requiere limpieza ni mantenimiento.

Analizador Bioquímico Automatizado

Horus EC-9250

Horus
Lab Equipments



Transmitancia perfecta



Sistema de lavado mejorado



Ideal para laboratorios veterinarios de referencia

Alta precisión y componentes de excelente calidad.

- ✓ La sonda de muestra fabricada por una empresa de renombre mundial, garantiza un excelente desempeño del equipo y precisión en sus resultados.
- ✓ Posee un sistema de protección anticollisión y retroalimentación en tiempo real del balance de reactivos.
- ✓ Las bombas, válvulas y fuentes de luz de un conocido fabricante japonés garantizan una vida útil más prolongada.

Sistema óptico avanzado.

- ✓ Cubetas de reacción de material especial que garantiza una transmitancia perfecta.
- ✓ Totalmente cerrado, el sistema óptico está protegido contra el moho, humedad y óxido.

Sistema de limpieza patentado.

- ✓ Sistema de limpieza patentado sin residuos de líquido, posee múltiples agujas de lavado, lo cual garantiza una excelente limpieza y resultados precisos.
- ✓ La interfaz interior y exterior de la sonda de muestra se limpia constantemente con alta presión manteniendo y evitando contaminación.

Función de detección de reacción en tiempo real perfecta.

- ✓ Monitoreo en tiempo real de todo el proceso de reacción y visualización dinámica de la curva de reacción, temperatura, volumen de reactivo.

Software inteligente con operación simple.

- ✓ La interfaz combinada con gráficos hace que la operación sea más simple.
- ✓ Potente función de edición de consultas y análisis estadístico.
- ✓ Admite todo el sistema operativo LIS conexión bidireccional.

LÍNEA DE GASES Y ELECTROLITOS



Analizador de gases y electrolitos

seamaty

El Seamaty VG1 es un analizador de electrolitos de gases en sangre veterinario portátil, fácil de usar, con resultados precisos de bioquímica de gases en sangre, electrolitos y cuidados críticos en solo unos minutos. Además, le permite realizar el diagnóstico en cualquier lugar.

Parámetro	Rango reportable	Parámetro	Rango reportable	Parámetros calculados	
Na+	90~180mmol/L	pCO ₂	10.0~150.0mmHg	TCO ₂ *	tHb(est)
K+	1.5~11mmol/L	pO ₂	10~425mmHg	cHCO ₃ -*	BE(ecf)*
Cl-	65~140mmol/L	Hct	10~75%PCV	BE(b)*	cSO ₂ *
CA ²⁺	0.25~2.50mmol/L	Glu	1.1~38.9 mmol/L <small>en desarrollo</small>	AG*	
pH	6.500~8.000	Lac	0.3~20.0 mmol/L <small>en desarrollo</small>		

Modelo VG1

- En 3 simples pasos.
- Libre de mantenimiento.
- Sangre total o capilar.
- Calibración automática.
- Portable.
- Resultados precisos en 4 min.

Calibración Automática



Especificaciones Técnicas SE1	
Principio	Electrodo selectivo de iones (ISE) para electrolitos
Volumen de la muestra	100 uL
Tiempo de prueba	4 minutos/muestra
Almacenamiento	Hasta 500.000 resultados de pruebas
Calibración	Calibración interna
Impresora	Impresora interna
Interfaz	USB, tipo C
Parámetro	Gases y electrolitos en sangre
Tipo de muestra	Sangre entera arterial o venosa
Escáner	Escáner interno para cartucho Escáner interno para muestra (opcional)
Conexión	WIFI, LIS bidireccional (HI7)
Pantalla	Táctil de 4,3 pulgadas
Batería	5000mAh



LÍNEA DE INMUNOFLUORESCENCIA

Analizador de Inmunofluorescencia

VMFIA 1001

El analizador de inmunofluorescencia es un dispositivo de diagnóstico in vitro para el **análisis cuantitativo** de kits de prueba que detectan una amplia gama de **antígenos, anticuerpos, hormonas y otras proteínas** de importancia para la salud canina y felina.

Equipado con una **innovadora tecnología de inmunofluorescencia** de resolución temporal, ofrece una excelente **sensibilidad y especificidad** con múltiples **tipos de muestras**.

VetFor
ANIMAL CARE

Sensibilidad máxima

Calibración automática

Interfaz amigable

Diseño compacto



Resultados en minutos



Kits de Inmunofluorescencia: Caninos y Felinos



Kit de prueba

Contenido de la caja

- Cassette de prueba.
- Diluyente de muestra.
- Punta de pipeta.
- ID-Chip.
- Instrucciones de uso.

Ventajas

- Procedimiento sencillo.
- Interfaz de usuario adaptable.
- Resultados integrales.
- Sistema operativo fácil de usar.
- Alta sensibilidad.

Categoría	Ref. No	Nombre	Especie	Tamaño del kit
Marcadores cardíacos	VVP12	cNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP24	fNT-proBNP Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP27	cTnI Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP28	fTnI Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP33	D-Dimer Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
Biomarcador renal	VVP30	fSDMA Rapid Test Kit (FIA)	F	8 T
	VVP31	cSDMA Rapid Test Kit (FIA)	C	8 T
Proteína de fase aguda	VVP01	cCRP Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP15	fSAA Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
Pancreatitis	VVP08	cPL Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP16	fPL Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
Diabetes	VVP32	HbA1c Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
Hormona	VVP02	cPROG Rapid Test Kit (FIA)	C	8 T
	VVP03	cTSH Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP26	Thyroxine(T4) Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
	VVP29	Canine fT4 Rapid Test Kit (FIA)	C/F	10 T
	VVP04	Cortisol Rapid Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP38	Feline fT4 Rapid Test Kit (FIA)	F	10 T
Infeccioso	VVP05	CPV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP06	CDV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP07	CCV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C	10 T
	VVP17	FCV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP18	FHV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP22	FCoV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP34	FeLV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP35	FPV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T
	VVP36	Giardia Rapid Antigen Test Kit (FIA)	C/F	10 T
	VVP37	FPV/FCV Rapid Antigen Test Kit (FIA)	F	10 T

LÍNEA DE PRUEBAS RÁPIDAS

Para el cuidado felino



Este kit de prueba es un **inmunoensayo de flujo lateral** diseñado para la Detección **cualitativa** in vitro.

Kit de prueba

Contenido de la caja

- Cassette de prueba.
- Tampón de extracción.
- Hisopo de muestreo.
- Instrucciones de uso.

Ventajas

- Fácil de usar.
- El diagnóstico temprano puede salvar vidas.
- Altos índices de precisión.
- El resultado está listo en cuestión de minutos.
- Herramienta de diagnóstico minimalista.

Productos Felinos

Ref. No	Name	Specimen	Kite Size
VVD07	FCoV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD08	FIP Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD09	FIV Antibody + FeLV Antigen Rapid Test Kit	S/P/WB	10 T
VD11	FPV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VD12	FIV Rapid Antibody Test Kit	S/P/WB	5 T
VVD15	FeLV Rapid Antigen Test Kit	S/P/WB	10 T
VVD22	FHV Rapid Antigen Test Kit	E/N/SL	10 T
VVD25	FCV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD26	FCoV Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD27	FeLV Rapid Antibody Test Kit	S/P/WB	10 T
VVD31	FCoV Ag + FCoV Ab Rapid Combo Test Kit	S/P/F	10 T
VVD38	FIV Ab + FCoV Ab + FeLV Ag Rapid Combo Test Kit	S/P/WB	5 T
VVD40	FIV Ab + FCoV Ab + FeLV Ag Rapid Combo Test Kit	F	5 T

* E: Eye, N: Nasal, SL: Saliva, F: Feces, S: Serum, P: Plasma, WB: Whole Blood

Productos Caninos & Felinos

Ref. No	Name	Specimen	Kite Size
VVD13	Toxo Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD04	Giardia Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD24	HW Rapid Antigen Test Kit	S/P/WB	10 T

* F: Feces, S: Serum, P: Plasma,

Para el cuidado canino



Ventajas

- Procedimiento simple y no invasivo.
- Apoya el diagnóstico temprano de CDV.
- Fácil de interpretar.
- Resultados rápidos y precisos.
- Diseño minimalista.

Este kit de prueba está diseñado para la detección cualitativa in vitro.


Ref. No	Name	Specimen	Kite Size
VVD01	CDV Rapid Antigen Test Kit	N/SL	10 T
VVD02	CPV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD03	CCV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD05	CPV + CCV Rapid Combo Antigen Test Kit	F	10 T
VVD06	CPV + CCV + Giardia Rapid Antigen Test Kit	F	5 T
VVD10	Leishmania Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD14	CDV Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD16	Rabies Rapid Antigen Test Kit	N/SL	10 T
VVD17	Ehrlichia Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD18	Lyme Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD19	Anaplasma Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD20	C. Brucella Rapid Antibody Test Kit	S/P/WB	10 T
VVD21	Rabies Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD23	Crypto. Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD28	EHR Ab + ANA Ab Rapid Combo Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD29	LSH Ab + ANA Ab +EHR Ab Rapid Combo Antibody Test Kit	S/P	5 T
VVD30	LSH Ab + ANA Ab + EHR Ab+ HW Ag Rapid Combo Test Kit	S/P/WB	5 T
VVD32	CAV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD33	CIV Rapid Antigen Test Kit	F	10 T
VVD34	CPV Rapid Antibody Test Kit	S/P	10 T
VVD35	CDV + CAV Rapid Combo Test Kit	N/SL/F	10 T
VVD36	CDV + CAV + CIV Rapid Combo Test Kit	N/SL/F	5 T
VVD37	CPV + CCV + GIA + CRV Rapid Combo Test Kit	N/SL/F	5 T
VVD39	Lyme Ab + ANA Ab + EHR Ab + HW Ag Rapid Combo Test Kit	S/P/WB	5 T
VVD41	Lyme Ab + ANA Ab + HW Ag Rapid Combo Test Kit	S/P/WB	5 T
VVD42	CAV Ag + CIV Ag Rapid Combo Test Kit	F	10 T
VVD43	CPV + CDV Ag Rapid Combo Test Kit	S/P/N/SL	10 T

* N: Nasal, SL: Saliva, F: Feces, S: Serum, P: Plasma, WB: Whole Blood

LÍNEA DE MICROSCOPIOS

Nexcope®

NE-300 tiene objetivos plan acromáticos al infinito de campo plano de la serie NIS de alta calidad y una lente de campo de 20 mm de visión que puede proporcionar imágenes microscópicas en color verdadero de alta definición.

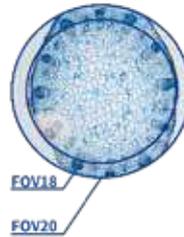

NE-300B

NE-300T

NE-300X

Diseño elegante para un trabajo cómodo y de alta calidad gracias a su sistema óptico

Objetivos Plan Acromáticos
Infinito Serie NIS



Es condensador Abbe N.A. 1.25
con escalas de posición de
objetivos de colores



Pantalla LCD inteligente y
revólver codificado



Amplia estación de trabajo
con calibración vernier



LÍNEA DE EQUIPAMIENTO



Cabina de Bioseguridad HR1200-IIA2

- ✓ Filtro principal ULPA de 99, 9995% de eficacia.
- ✓ Pantalla LCD intuitiva e informativa.
- ✓ Monitorización en tiempo real de la velocidad y salida del aire, temperatura, humedad, entre otros.



Centrífuga hematocrito

- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Rotor para 24 capilares.
- ✓ Velocidad regulable y segura.



Centrífuga 12 tubos

- ✓ Bajo nivel de ruido.
- ✓ Rotor angular de 12 tubos.
- ✓ Velocidad regulable y segura.



Incubadora IB-9052A

- ✓ Interior de acero inoxidable.
- ✓ Con puerta interna de doble vidrio resistente.
- ✓ Modelos con diferentes capacidades.
- ✓ Control de microprocesador y pantalla digital.



Tubos de muestra

- ✓ Aditivo: Ninguno
- ✓ Volumen: 0.5-1 ml
- ✓ Rack por 100 tubos.



Tubos de muestra

- ✓ Aditivo: EDTA K3/K2
- ✓ Volumen: 0.5-1 ml
- ✓ Rack por 100 tubos.



Tubos de muestra

- ✓ Aditivo: Citrato de sodio
- ✓ Volumen: 0.5-1 ml
- ✓ Rack por 100 tubos.



Micropipetas graduables

- ✓ Rango de volumen: 10-100 uL / 100-1000 uL
- ✓ Rango variable.
- ✓ Ergonómicas y livianas.



Tips para micropipetas

- ✓ Presentación: bolsa de 1000 unds.
- ✓ Rango de volumen: 10-100 uL / 100-1000 uL.

¡LLEGAMOS A TODO EL PERÚ!

CONTÁCTANOS

ventas07@bioassay.com.pe





BIOASSAY LATAM S.A.C.

Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 913 400 646

E-mail: ventas07@bioassay.com.pe

Facebook: Bioassay - Equipos para Laboratorio Vet

Instagram: [bioassay_vet](#)

Linkedin: Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe

