

FICHA TÉCNICA

 **Kayto**

**ANALIZADOR DE COAGULACIÓN
DE 4 CANALES**

MODELO RT-2204 C



***Diferentes pruebas en 4
canales de lectura***

Especificaciones Técnicas	
Equipamiento	Analizador de coagulación semi-automatizado
Modelo	RT-2204 C
Marca	Rayto
Metodología	Dispersión de luz y análisis porcentual
Características	• Canales de prueba: 4 canales. Se pueden procesar cuatro muestras al mismo tiempo. • Pantalla de 6" LCD • Teclado de fácil operación • Autocomprobación de encendido automático. • Canales de calentamiento de reactivos: 6 canales. • Canales de calentamiento de muestras: 24 posiciones. • Impresora térmica interna. • Analizador compatible con todas las marcas de reactivos del mercado. • Múltiples parámetros programables y una gran capacidad de almacenamiento de datos históricos. • Temperatura de calentamiento de canales: 37°C. • Programa de control de calidad y calibración incorporada. • Interface: RS-232 puerto de comunicación bidireccional. • Entrada: mouse externo, opcional. • Pipeta electrónica incorporada • Peso: 6.5 kg.
Accesorios de equipo	• Papel térmico • Pipeta electrónica incorporada. • Copas y frascos. • Cable poder • Manual de Usuario.
Accesorios de equipo	Ambiente de almacenamiento: • Temperatura: 0 °C ~ 40 °C • Humedad relativa: ≤85% Ambiente de trabajo: • Temperatura: 10°C~30°C • Humedad relativa: ≤70% Suministro de poder 110V-240V, 50/60Hz
Dimensiones	410 mm ×310mm×160mm

Test **PT** Prothrombin Time

Reagent

Sample vol (ul) Reagent vol (ul)

Prewarm t1 (s) Prewarm t2 (s)

Test time (s) Result point %

Reference (s) ISI

Normal range - s

Formula: $y=kx+b$ k= b= ☐ DFIB

Configuración de pruebas

Test Combination

1-PT	2-PT	3-PT	4-PT
1-PT	2-PT	3-PT	4-PT
1-PT	2-PT	3-PT	4-PT
1-PT	2-APTT	3-PT	4-PT
1-PT	2-PT	3-PT	4-PT
1-PT	2-PT	3-PT	4-PT
1-PT	2-PT	3-PT	4-PT
1-PT	2-APTT	3-PT	4-PT

Combinación de pruebas

Add control 2 Add control 1

1:PT 2:PT

Add standard 2: 50.0% Add sample

3:PT 4:PT

Procesamiento

Input patient information

Date SampleNO


Name Age

Sex ☒ male ☐ female ☐ unknown

Dept Sender

Patient NO. Bed NO.

Configuración de los datos del paciente

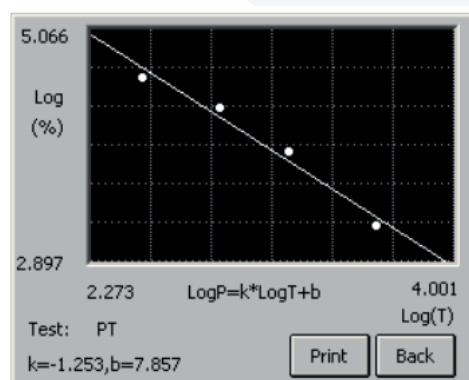

Curvas de calibración

Kayto

Menú principal

Diferentes pruebas en 4 canales de lectura



Dirección: Pasaje Kenko 178 Pueblo Libre, Lima Perú

Whatsapp: 980 658 053

E-mail: informes@bioassay.com.pe

Bioassay Perú



www.bioassay.com.pe